

ottobock.

Skeo Sealing

Stabilité et confort.

Quality for life

Stabilité et confort

Nous avons accordé une attention toute particulière au développement du manchon Skeo Sealing. En effet, nous avons minutieusement étudié les manchons du marché et écouté attentivement les patients parler de leur expérience et défis quotidiens. Nous avons utilisé ces connaissances et notre expertise pour créer un manchon qui se démarque par sa facilité d'utilisation.


Skeo Sealing se concentre sur l'essentiel : un manchon, deux versions, et un maintien sûr grâce à un anneau d'étanchéité intégré.

- Skeo Sealing peut être combiné avec un système de dépressurisation passive (valves).
- Il offre une grande stabilité ce qui rend son utilisation possible même sur des moignons présentant beaucoup de masses molles.





Le manchon Skeo Sealing joue un rôle clé dans l'indépendance et la liberté de mouvement ressenties par les patients dans leur vie quotidienne. En effet, il parvient à allier fonctionnalité et haut niveau de sécurité et de confort. Sa conception et sa facilité de manipulation en font un support fiable au quotidien.

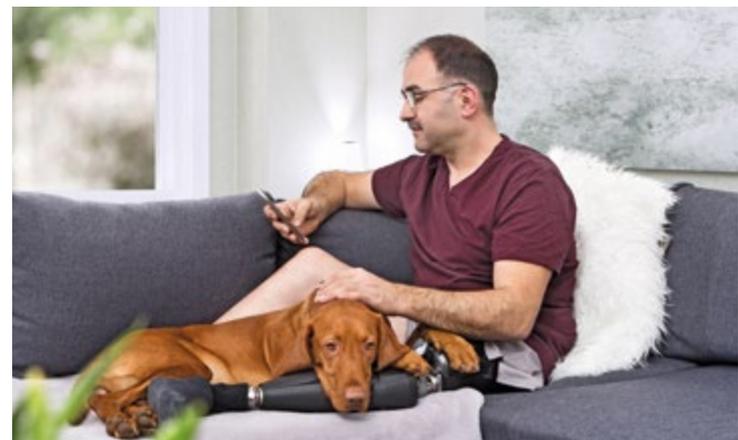

Skeo Sealing

Caractéristiques et avantages




Un anneau d'étanchéité pour un maintien sûr

Le manchon est fabriqué avec le silicone de qualité propre à la gamme Skeo. Grâce à son anneau d'étanchéité intégré, Skeo Sealing maintient en toute sécurité la dépression dans l'emboîture.



Une surface intérieure auto-agrippante pour une protection douce

L'additif Skinguard aux propriétés bactériostatiques est présent dans le manchon et limite la prolifération des bactéries ainsi que l'apparition de mauvaises odeurs. La texture intérieure assure la bonne adhérence du manchon au moignon et sa protection.

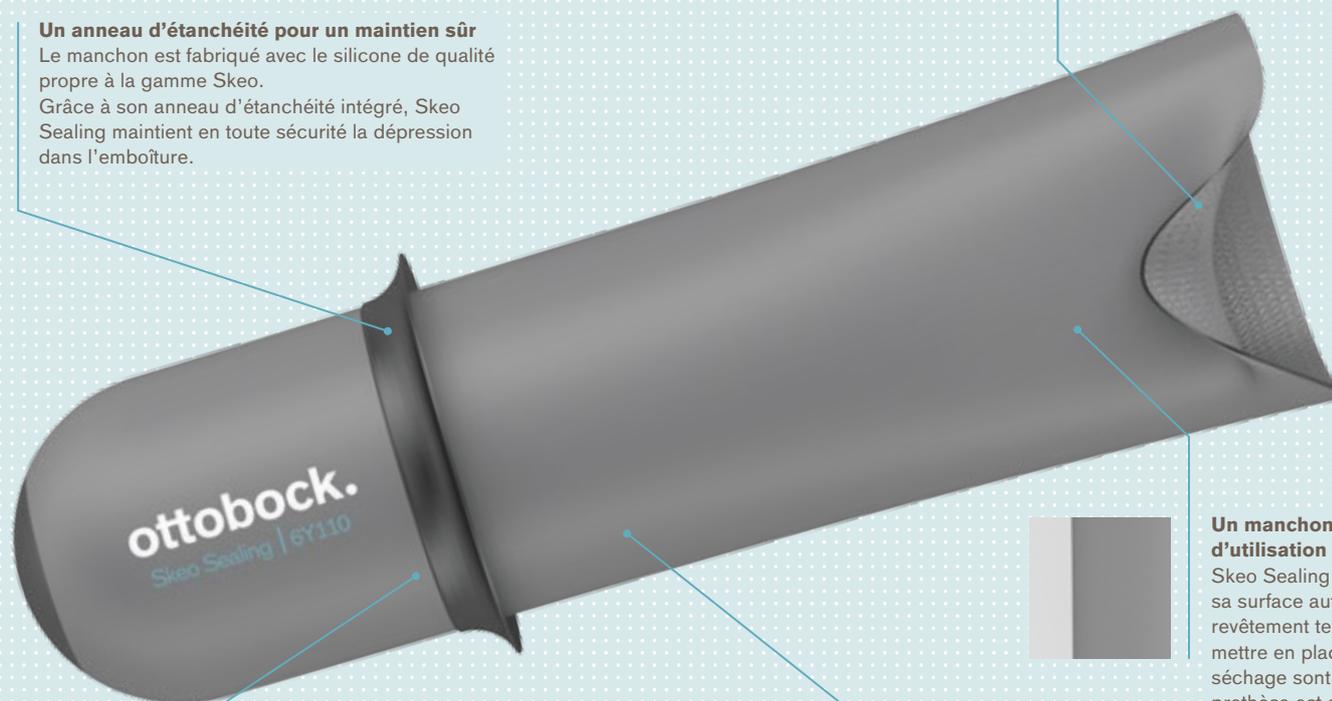

Un manchon d'une grande simplicité d'utilisation

Skeo Sealing peut être facilement découpé. Grâce à sa surface auto-glissante et à l'absence de revêtement textile, les patients peuvent aisément le mettre en place et le retirer. Le nettoyage et le séchage sont rapides à réaliser. Le chaussage de la prothèse est aussi facilité.



Deux hauteurs possibles pour un ajustement idéal

Deux hauteurs de positionnement de l'anneau sont disponibles en fonction des spécificités des moignons.

Un manchon au confort remarquable

Une matrice intégrée sur toute la longueur du manchon atténue l'effet de pistonage lors de la phase pendulaire. Les frictions sont minimisées, ce qui rend le manchon confortable et agréable à porter. Le manchon se conforme au moignon sans créer d'irritations.

Le maintien et le confort de la prothèse peuvent être améliorés de façon significative en combinant le Skeo Sealing avec une emboîture parfaitement ajustée. Retrouvez nos recommandations en 6 étapes :



1 Passez commande de la taille de manchon souhaitée



2 Ajustez le manchon



3 Réalisez le moulage en plâtre



4 Modelez le positif



5 Préparez l'emboîture test




6 Fabriquez l'emboîture définitive

Pour en savoir plus, veuillez consulter les informations techniques du Skeo Sealing.

Caractéristiques techniques

Référence	6Y110	
Collerette	Anneau intégré pour l'étanchéité de l'emboîture	
Niveau d'amputation	Transfémoral (TF)	
Accrochage distal	Sans	
Revêtement textile	Sans	
Forme d'emboîture	Emboîture adaptée	
Matrice	Sur toute la longueur du manchon	
Taille en mm (voir circonférence distale)	Hauteur de l'anneau à 10 cm à 15 cm de l'extrémité distale du moignon	Hauteur de l'anneau à 17 cm à 22 cm de l'extrémité distale du moignon
	280 × 10	280 × 17
	300 × 10	300 × 17
	320 × 10	320 × 17
	340 × 10	340 × 17
	360 × 10	360 × 17
	380 × 10	380 × 17
	400 × 10	400 × 17
	450 × 10	450 × 17
	500 × 10	500 × 17
	550 × 10	550 × 17
Exemple de commande	Référence = circonférence × hauteur de l'anneau	
	6Y110=320×10	

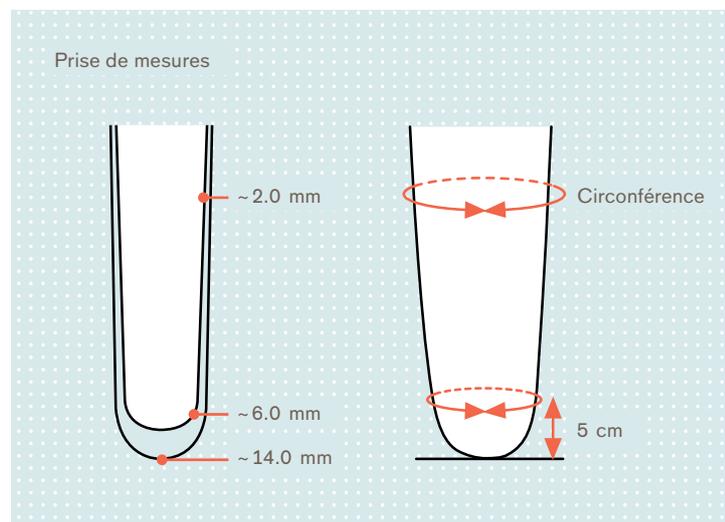





Information destinée aux professionnels de santé.

Fabricant Otto Bock Healthcare. Dispositif médical de classe I pris en charge par les organismes d'assurance maladie sous la référence 2760643. Lire attentivement la notice d'utilisation.

Otto Bock France

4 rue de la Réunion CS 90011

91978 Courtaboeuf Cedex

Tél. 01.69.18.88.30 · Fax 01.69.18.06.17

information@ottobock.fr · www.ottobock.fr