



ottobock.

# Klaxon Klick Family

L'art du déplacement

# Klaxon Klick Family

Une gamme de roues motorisées à fixation universelle pour faciliter les déplacements en intérieur comme en extérieur.

Adaptable sur les fauteuils manuels pliants ou à châssis fixe, le système Klick s'accroche et se décroche facilement du fauteuil - en quelques secondes - sans l'assistance d'une tierce personne.



## En détail



**Klick Power**



**Klick Race**




**Klick Monster**

Batteries Lithium 5,8 Ah ou 11 Ah  
Détachable et rechargeable  
Autonomie jusqu'à 30 km

Écran LCD multifonction, couleur avec mode nuit automatique



Guidon réglable en inclinaison, en hauteur.  
Guidon Têtra en option

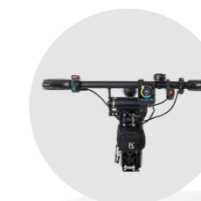

Klick connecteur



Béquille pliable et garde-boue

# Klick Power

Idéal pour les déplacements urbains



Grâce à son moteur 750 W, ses 5 niveaux de vitesse au choix avec régulateur de vitesse et marche arrière, le Klick Power permet à l'utilisateur d'être indépendant et d'avoir une vie active.

Compact et facile à ranger dans une voiture (poids 8,5 kg), il est équipé d'un écran LCD multifonctions et d'un système de freins électroniques (EBS).

Il est adapté pour les itinéraires plats, et facilement manoeuvrable dans des endroits étroits.

## Options disponibles

- + Guidon pour personnes tétraplégiques
- + Extension de guidon
- + Batteries 11 Ah
- + Vitesse 10 ou 15 km/h





# Klick Race

Pour la ville et les terrains accidentés

Polyvalent, le Klick Race est le compromis parfait pour la mobilité urbaine et les déplacements hors route (terrains vallonnés ou accidentés).

Avec ses moteurs 1500 W et sa roue 14", il est puissant, maniable et permet une conduite sport ou confort.

Il est équipé d'un écran LCD multifonctions, d'un système de freins électroniques (EBS), de 5 niveaux de vitesse au choix avec régulateur de vitesse et marche arrière.

## Options disponibles

- + Guidon pour personnes tétraplégiques
- + Extension de guidon
- + Batteries 11 Ah
- + Vitesse 10 ou 15 km/h



# Klick Monster

Pour les sentiers difficiles



Équipé d'une roue surdimensionnée (20") et couplé à des roues VTT montées sur le fauteuil roulant, le Klick Monster est adapté pour les sentiers difficiles et les raids.

Il est équipé d'un écran LCD multifonctions, d'un système de freins électroniques (EBS), de 5 niveaux de vitesse au choix avec régulateur de vitesse et marche arrière.

#### Options disponibles

- + Extension de guidon
- + Vitesse 10 ou 15 km/h





# Options

- 1 : Roues VTT pour fauteuil avec axe 12 ou 12,7 mm
- 2 : Écran LCD multifonctions, couleur
- 3 : Feu avant à LED blanc, intégré à la batterie
- 4 : Panier 10L ou 16L
- 5 : Sac de rangement pour transport de la roue Klick



1



2



3




4



5

## Guidon Standard

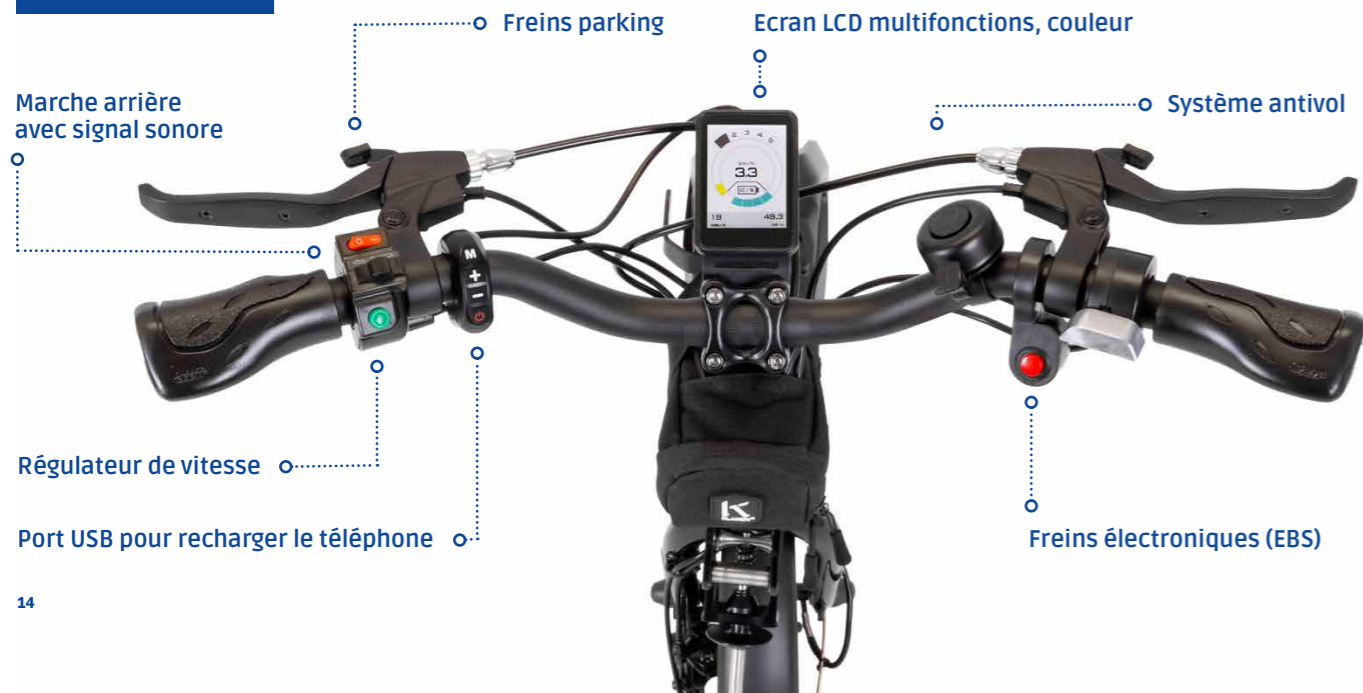

## Guidon Tetra





## Caractéristiques techniques

Modèle	Klick Power	Klick Race	Klick Monster
Matériau du cadre	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Taille de la roue	14"	14"	20"
Puissance nominale du moteur	250 W	1 000W	1 000W
Puissance maximale du moteur	750 W	1 500W	1 500W
Hauteur d'obstacles franchissables	5 cm	5 cm	5 cm
Tenue en pente	10 %	10 %	10 %
Type de guidon	Standard ou Tetra	Standard ou Tetra	Standard
Marche arrière	Oui	Oui	Oui
Régulateur de vitesse	Oui	Oui	Oui
Vitesse	10 / 15 km/h	10 / 15 km/h	10 / 15 km/h
Dimensions (L x H x P)	50 x 90 x 40 cm	50 x 90 x 40 cm	50 x 90 x 50 cm
Poids du klick sans batterie	8,5 kg	12 kg	15 kg
Poids de la batterie	1,5 kg	1,5 kg	3 kg
Poids max utilisateur	120 kg	120 kg	120 kg

### Ottobock France

4 rue de la Réunion CS 90011  
91978 Courtaboeuf Cedex France  
T +33 (0) 1 69 18 88 30 • F +33 (0) 1 69 07 18 02  
information@ottobock.fr • www.ottobock.fr

Fabricant Ottobock Healthcare. Lire attentivement la notice d'utilisation.  
Information destinée au grand public.

Quality for life