

ottobock.



Motus 2.0

Le fauteuil actif polyvalent



Motus 2.0

“ La nouvelle famille Motus ”

Cette famille de fauteuils actifs en aluminium a été repensée pour proposer des versions plus légères (à partir de 11,6 kg), plus fonctionnelles (pliantes mais toujours résistantes) tout en conservant un design épuré et attractif.



Motus CS

Potences fixes

Motus CV

Potences amovibles

Le Motus 2.0 est disponible dans 4 finitions pour tenir compte des différents besoins des utilisateurs : la **version CV** avec ses potences amovibles et escamotables, la **version CS** avec ses potences fixes, la **version Héli** pour les personnes hémiplegiques et la **version XXL** pour les fortes personnalités.

Les 48 positions de réglages du Motus 2.0 permettent d'optimiser la position de l'utilisateur, tout comme le **dossier réglable en tension** qui accroît son confort.

La maniabilité et la stabilité du Motus 2.0 sont aussi impressionnantes, grâce à **son croisillon 3 branches**. Le fauteuil supporte un poids maximum utilisateur de 140 kg (version XXL).

Enfin, la dimension transport n'a pas été oubliée puisque le Motus 2.0 a été **crash testé** et peut être transporté en véhicule avec son utilisateur. Pour faciliter le chargement dans une voiture ou le rangement, le Motus 2.0 propose en plus du **dossier fixe**, un **dossier inclinable 30° rabattable sur l'assise** ou un **dossier cassant**.

De nombreuses options et accessoires complètent les différentes versions du Motus 2.0.



Motus CV

Le modèle CV se caractérise par ses potences amovibles et escamotables vers l'intérieur ou l'extérieur, facilitant les transferts.

Il peut être doté de garde-boue en aluminium de la couleur du fauteuil ou en carbone, et également d'accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur.

Le Motus CV peut être réglé sur 48 positions différentes pour coller au plus juste à la morphologie et aux besoins des utilisateurs. Son réglage des fourches à l'avant est particulièrement performant.



Exemple de configuration



Motus CS

Le modèle CS est idéal pour une utilisation dans des endroits étroits grâce à ses potences fixes. Sa palette monobloc peut être escamotée à gauche ou à droite en option.

Il peut être doté d'un dossier réglable en tension et de garde-boue en aluminium de la couleur du fauteuil ou en carbone.

Il est compact, stable et maniable.



Exemple de configuration





Motus Héli

Le modèle Héli est spécifiquement conçu pour les personnes hémiplegiques qui souhaitent se déplacer régulièrement tout en étant confortablement installées.

Les nombreuses options permettent d'optimiser la position de l'utilisateur grâce notamment au dossier réglable en tension et aux différents modèles de gouttières.

En ce qui concerne le mode de propulsion, le Motus Héli peut être utilisé podalement grâce à un léger déport vers l'extérieur des fourches, ou bien au moyen d'une double main courante.



Exemple de configuration




Motus XXL

La version XXL est conçue pour les personnes de grande taille et/ou à forte corpulence.

Grâce à son double croisillon, elle supporte un poids utilisateur jusqu'à 140 kg.

Robuste et renforcé, le Motus XXL n'en demeure pas moins léger (à partir de 12,8 kg).

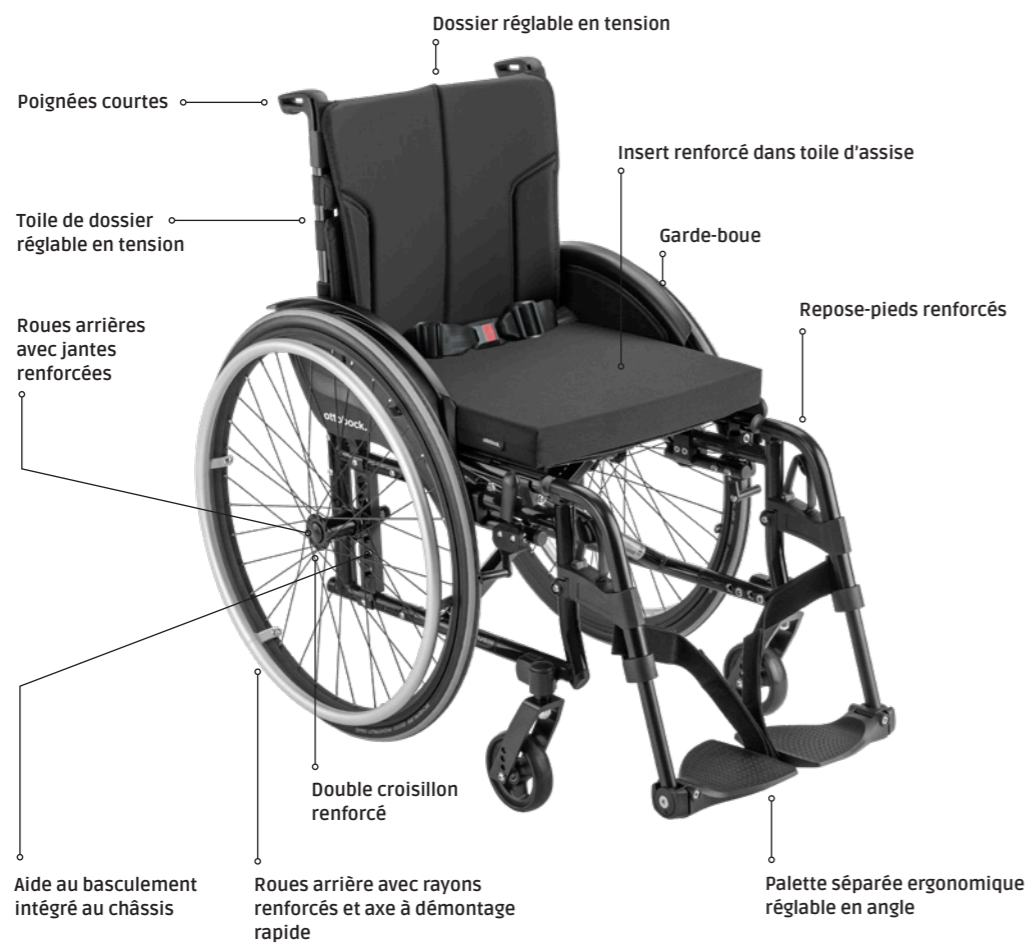

Exemple de configuration



Personnalisation du design



Freins ciseaux



Dossier cassant



Dossier inclinable à 30° et rabattable



Dossier réglable en tension



Double main courante



Poignée de poussée rabattable



Roulette anti bascule



Garde-boue



Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur de la couleur du châssis



Aide au basculement

Personnalisation du design


Caractéristiques techniques

Modèle	Motus CS	Motus CV	Motus Héli	Motus XXL
Largeur totale	50,5 - 68 cm	50,5 - 68 cm	50,5 - 75,5 cm	65,5 - 75,5 cm
Longueur totale	80,5 - 115,5 cm	80,5 - 115,5 cm	80,5 - 115,5 cm	86,5 - 115,5 cm
Hauteur totale	67 - 110 cm	67 - 110 cm	67 - 110 cm	68 - 110 cm
Profondeur d'assise	36 - 54 cm	36 - 54 cm	36 - 54 cm	42 - 54 cm
Largeur d'assise	35,5 - 48 cm	35,5 - 48 cm	35,5 - 55,5 cm	50,5 - 55,5 cm
Hauteur d'assise avant	38 - 55 cm	38 - 55 cm	38 - 55 cm	38 - 55 cm
Hauteur d'assise arrière	36 - 52 cm	36 - 52 cm	36 - 52 cm	36 - 52 cm
Carrossage	0° à 4°	0° à 4°	0° à 4°	0°
Inclinaison du dossier	0° à 30°	0° à 30°	0° à 30°	0° à 30°
Hauteur du dossier	30 - 50 cm	30 - 50 cm	30 - 50 cm	30 - 50 cm
Longueur du segment jambier	34 - 55 cm	34 - 55 cm	34 - 55 cm	34 - 55 cm
Dimension plié	27 - 33 cm	27 - 33 cm	27 - 33 cm	27 - 33 cm
Poids max utilisateur	125 kg	125 kg	140 kg	140 kg
Poids du fauteuil	à partir de 11,6 kg	à partir de 11,9 kg	à partir de 11,8 kg	à partir de 12,8 kg

Couleurs de châssis




Blanc neige RAL 9016

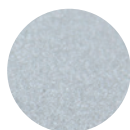

Gris clair métallique




Bleu métallique

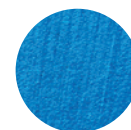


Bleu électrique




Noir mat

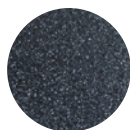

Anthracite métallique

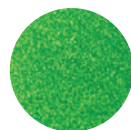

Vert pomme métallique

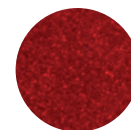

Rouge cardinal

Ottobock France

4 rue de la Réunion CS 90011

91978 Courtaboeuf Cedex France

T +33 (0) 1 69 18 88 30 • F +33 (0) 1 69 07 18 02

information@ottobock.fr • www.ottobock.fr

Fabricant Ottobock Healthcare. Lire attentivement la notice d'utilisation.
Information destinée au grand public.

Quality for life